


Catéter espiral tradicional

HS CODE: 9018.39.29.900

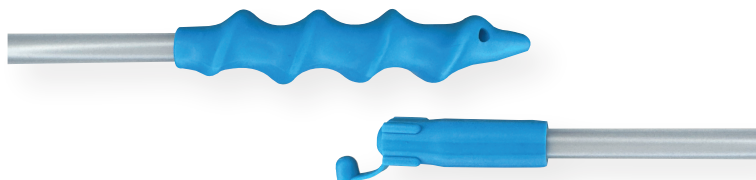

Descripción del producto:

Este catéter es el estándar clásico para la inseminación artificial convencional en cerdas multíparas. Su diseño con punta en espiral simula la anatomía del pene del verraco, permitiendo un anclaje mecánico firme en los pliegues del cuello uterino. Al ser un modelo tradicional sin lubricar, otorga al operador un control total sobre el uso de geles externos según la necesidad de cada hembra. Es una herramienta altamente efectiva para asegurar un bloqueo cervical óptimo y una deposición precisa del semen, minimizando el reflujo y maximizando las tasas de fertilidad.

Características:

- **Cabecal Espiral Anatómico:** Fabricado en elastómero flexible de alta calidad que se adapta a la forma del cérvix mediante un movimiento de rotación.
- **Superficie Tradicional (Sin Lubricar):** Permite la aplicación manual de lubricantes específicos para inseminación, adaptándose a la preferencia del técnico y las condiciones de la hembra.
- **Cuerpo de Polímero Flexible:** Tubo de alta resistencia que facilita la manipulación y el avance sin riesgo de colapso o quiebre durante el procedimiento.
- **Tapón de Seguridad Trasero:** Incluye un sellado hermético para evitar la entrada de aire o contaminantes y asegurar la retención de la dosis seminal.
- **Conector Universal:** Compatible con todos los formatos de envases de semen (sachet, botellas o tubos) estándar del mercado.

Beneficios:

- **Cabecal Espiral Anatómico:** Fabricado en elastómero flexible de alta calidad que se adapta a la forma del cérvix mediante un movimiento de rotación.
- **Superficie Tradicional (Sin Lubricar):** Permite la aplicación manual de lubricantes específicos para inseminación, adaptándose a la preferencia del técnico y las condiciones de la hembra.
- **Cuerpo de Polímero Flexible:** Tubo de alta resistencia que facilita la manipulación y el avance sin riesgo de colapso o quiebre durante el procedimiento.
- **Tapón de Seguridad Trasero:** Incluye un sellado hermético para evitar la entrada de aire o contaminantes y asegurar la retención de la dosis seminal.
- **Conector Universal:** Compatible con todos los formatos de envases de semen (sachet, botellas o tubos) estándar del mercado.

Precauciones y Mantenimiento

- **Uso de Lubricante Externo:** Se recomienda el uso de lubricantes estériles y no espermicidas para facilitar la inserción y evitar molestias en la hembra.
- **Técnica de Inserción:** Debe introducirse mediante un suave movimiento de rotación hacia la izquierda (sentido antihorario) hasta notar el anclaje cervical.
- **Producto Descartable:** Uso exclusivo para una sola inseminación. No reutilizar para evitar infecciones uterinas y pérdida de la integridad del cabecal.
- **Higiene:** Mantener el empaque sellado hasta el uso y manipular siempre con guantes limpios para garantizar la bioseguridad del tracto reproductivo.
- **Almacenamiento:** Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa para evitar que el material pierda su flexibilidad.